



Sega Dental 3D Yazıcı

Tüm diş uygulamalarınız için olağanüstü hız ve kalitede üretim!

Son derece hassas cerrahi kılavuzlar, geçici dişler, kronlar, köprüler, kısmi çerçeveler, özel ölçü tepsileri veya dişeti ve bunların hepsini birkaç dakika içinde üretebilirsiniz.

- Dental üretim için Ultra Hızlı DLP teknolojisi
- Taban gerektirmeyen mükemmel yapışma teknolojisi
- Mükemmel doğruluk ve hassasiyet
- %99,9'un üzerinde başarılı baskı oranıyla kararlı üretim
- 20.000 saat projektör garantisi
- Dakikalar içinde hızlı baskı için hızlı kürlenme özellikleri!

Hız Önemlidir!

Tüm uygulamalarda olağanüstü hız, doğruluk ve kalite!



🕒
26 dakika
2 Model 50 µm



🕒
14 dakika
108 Üye 50 µm



🕒
12 dakika
78 Geçici Diş 50 µm



🕒
35 dakika
6 İskelet - 50 µm




🕒
28 dakika
2 Cerrahi Kılavuz - 50 µm



🕒
44 dakika
2 Damak - 50 µm

Tüm Uygulamalar için Tek Cihaz

Her türlü dental uygulama için doğru üretim ve yüksek verim sağlar.

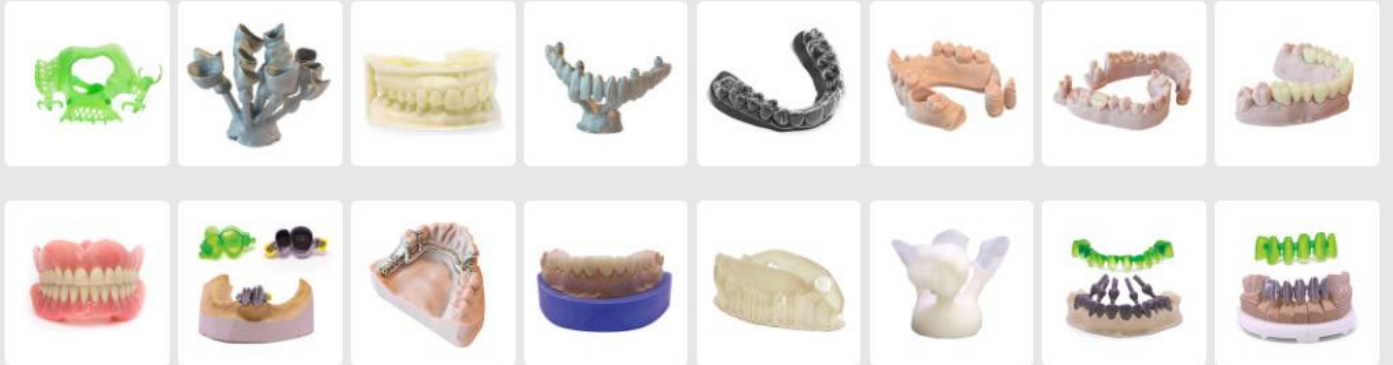

- ✓ Dental Çalışma Modeli
- ✓ Digital Wax Ups
- ✓ GÜdüklü Modeller
- ✓ Şeffaf Plak Üretimi

- ✓ Kron ve Köprü Uygulamaları
- ✓ Lamine Uygulamaları
- ✓ Metal Altyapı Üretim
- ✓ E-Max Press Üretimi

- ✓ Cerrahi İmplant Kılavuzu
- ✓ Monolitik Protez Üretimi
- ✓ Hızlı Protez Üretim
- ✓ Geçici Diş Üretimi

3D Yazıcılar için Dijital Diş Hekimliği Malzemeleri

Diş hekimleri için en yüksek ürün sonuçlarını sağlamak üzere geliştirilmiştir.



Şansa bırakmıyoruz. Diş hekimlerinin mükemmel sonuçlar elde edebilmesi için kendi markamız olan PowerResins ile en iyi reçineleri üretmeye devam ediyoruz. Ar-Ge ekibimiz tarafından özel olarak geliştirilen reçineler ile Segal Dental yazıcı ile %100 uyumlu çalışmaktadır.

Teknik Özellikler

Baskı Teknolojisi
Fast DLP

Baskı Alanı
12 cm x 6,8 cm

Z Katman Kalınlığı
50 / 30 / 15 mikron

Baskı Hızı
50 mikronda 90 mm/saat

Projektör
385nm / 405nm seçenekleri

Bağlantı
5GHz Wi-Fi - USB Sürücü

Yazıcı Kontrolü
7" Dokunmatik Ekran

Yazıcı Boyutları
32,5 cm x 32,5 cm x 56 cm

Yazıcı Ağırlığı
22 Kg